DATAMARS
Livestock™



Non puoi tutelare la salute senza trattare con cura.

Soluzioni per la somministrazione dei trattamenti veterinari precise, sicure ed efficienti.

njphillips DATAMARS

Simcro DATAMARS

DATAMARS
Livestock

Alla base del nostro approccio c’è la convinzione che la qualità di ogni trattamento sia parte della cura.

Datamars Livestock, divisione del gruppo internazionale Datamars, propone una gamma dedicata alla somministrazione dei trattamenti veterinari, che comprende sistemi per applicazioni iniettabili, orali e topiche, soluzioni senza ago e accessori progettati per garantire precisione e sicurezza, a supporto di una gestione dell’allevamento più responsabile.

In questo ambito, Simcro e NJ Phillips mettono a disposizione competenze maturate nel tempo, sviluppando dispositivi pensati per rendere ogni trattamento un’operazione controllata, affidabile e ripetibile, nel rispetto dell’animale e di chi lo gestisce.

Dalla gestione dei trattamenti di routine alle applicazioni più impegnative, su specie e contesti operativi differenti, ogni prodotto nasce per accompagnare il lavoro quotidiano con strumenti semplici da utilizzare, robusti e progettati per durare nel tempo.

Una somministrazione eseguita correttamente contribuisce a sostenere il benessere animale e la sicurezza dell’operatore, favorendo un approccio più attento e consapevole alla salute animale.

Con questo catalogo, Datamars Livestock ti accompagna nella scelta degli strumenti più adatti per la somministrazione dei trattamenti veterinari, pensati per offrire affidabilità, controllo ed efficienza in ogni applicazione.



Indice Generale

Terminologia	6
Scelta corretta dell'ago o della siringa	7
Siringhe con portaflacone e protezione	8-9
Siringhe con tubo pescante e protezione	10-15
Siringhe a ripetizione in plastica	16-18
Siringhe a ripetizione in metallo	20-23
Siringhe in plastica con portaflacone	24-29
Siringhe in metallo con portaflacone	30-33
Siringhe in plastica con tubo pescante	34-37
Siringhe in metallo con tubo pescante	38-41
Siringhe in nylon	42-45
Siringa multifunzione	46-47
Dosatori multifunzione orali e topici	48-49
Dosatore orale con portaflacone	50-51
Dosatori orali in plastica con tubo pescante	52-55
Dosatori orali in metallo con tubo pescante	56-59
Applicatori topici con tubo pescante	60-62
Soluzioni a zaino	64-65
Metricheck	66-67
Sistemi di somministrazione senza ago Pulse	68-74
Istruzioni di assemblaggio	76-77

Terminologia

Cilindro: la parte di una siringa che serve a misurare e contenere il farmaco. Il pistone spinge il liquido attraverso il cilindro e lo fa uscire dall'ago.

Cilindro in plastica di polipropilene: alcune siringhe offrono, come opzione, cilindri in plastica di polipropilene per l'uso con farmaci che richiedono maggiore resistenza chimica. Questi cilindri hanno un aspetto "opaco" e sono meno trasparenti, ma resistono a farmaci aggressivi.

Cilindro in plastica di polisulfone: la maggior parte delle siringhe è dotata di cilindro in plastica di polisulfone, compatibile con la maggior parte dei farmaci, tranne quelli che richiedono maggiore resistenza chimica. Questi cilindri sono più trasparenti, facilitando la lettura del volume.

Dosaggio fisso: il dispositivo ha un'unica opzione di dosaggio fisso visibile nella finestra indicatrice. E' presente un selettore di dosaggio, ma non può essere regolato o spostato.

Dosaggio variabile: il dispositivo ha un regolatore che permette di impostare in modo variabile le quantità di farmaco da iniettare. Consente un passaggio rapido tra diversi dosaggi, con una regolazione precisa grazie ai riferimenti graduati presenti sul pistone e sul cilindro.

Dosaggio selezionabile: il dispositivo permette all'operatore di scegliere tra diverse dosi preimpostate, ruotando un selettore dedicato. I volumi delle dosi sono chiaramente visibili nella finestra indicatrice e il selettore può essere regolato sulla dose desiderata prima della somministrazione.

Sistema a dosaggio selezionabile anteriormente: sistema di regolazione della dose utilizzato in alcune siringhe per la somministrazione di farmaci. Per impostare o modificare la dose, è necessario comprimere l'impugnatura della siringa e ruotare il selettore fino al volume desiderato. Quando si selezionano dosi più piccole, il pistone avanza verso la parte anteriore del cilindro. Per evitare perdite di prodotto, l'impugnatura non deve essere rilasciata subito dopo la somministrazione della dose precedente. La finestra indicatrice permette di leggere chiaramente il volume impostato. Ideale quando si utilizzano sempre gli stessi dosaggi.

Applicazione con dosatori topici (pour-on): per farmaci fluidi ad assorbimento cutaneo che vengono generalmente applicati sul dorso dell'animale. Si utilizzano come uno spray, garantendo un'applicazione semplice e sicura.
Lo spruzzo può essere a rosa (area rotonda e concentrata) o a ventaglio (getto largo per superfici più ampie).

Applicazione con dosatori orali (drencher): per la somministrazione di un farmaco o preparazione liquida direttamente nello stomaco dell'animale per via orale. Questo metodo è ampiamente utilizzato per diversi trattamenti, tra cui vermifughi (antielmintici) e la gestione di condizioni come meteorismo, diarrea, stipsi.

Siringhe a ripetizione con dosaggio selezionabile: il dispositivo ha una ghiera che consente di preimpostare la quantità di dosaggio; il pistone avanza verso l'estremità del cilindro ad ogni somministrazione, svuotandolo progressivamente, per poi essere ricaricato.

Scelta corretta dell'ago o della siringa

Le dimensioni di aghi e siringhe variano in base a fattori quali: la specie animale, la taglia e il tipo di somministrazione.

1 Che tipo di iniezione o via di somministrazione richiede il vaccino o il prodotto per il trattamento?

- Intramuscolare (IM): muscolo del collo o della spalla.
- Sottocutanea (SQ): spazio sotto la pelle.

2 Tipo di ago: cono in alluminio vs cono in polipropilene

- Cono in alluminio: resistente, per uso multiplo.
- Cono in polipropilene: per iniezioni singole, piccoli animali e cavalli.

3 Tipo di siringa

- Luer lock: connessione sicura tramite filettatura per un fissaggio "a blocco" sulla siringa.
- Luer slip: connessione a innesto rapido, a pressione, con fissaggio a frizione.
- Punta per catetere: utilizzata per il lavaggio/ pulizia di cateteri, tubi, etc.

4 Determinare la misura dell'ago

	SOTTOCUTANEA (SC)		INTRAMUSCOLARE (IM)	
	Calibro (gauge)	Lunghezza	Calibro (gauge)	Lunghezza
Piccoli animali	22	¾"	22	1"
Pecore & Capre	20	1/2" - 3/4"	20	1" - 1 1/2"
Suini	18	1/2" - 3/4"	18	1" - 1 1/2"
Suinetti	20	1/2"	20	3/4"
Bovini	16	3/4" - 1"	16	1" - 1 1/2"
Vitelli	18	3/4"	18	1"
Cavalli	20	1"	20	1" - 1 1/2"
Puledri	20	3/4"	20	1"

Consigli base per l'iniezione

- Seguire sempre le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto per il corretto dosaggio e la corretta somministrazione.
- Assicurarsi che il sito di somministrazione sia pulito e asciutto per prevenire infezioni.
- Pulire il punto di somministrazione sull'animale per evitare contaminazioni.
- Scegliere l'ago più piccolo possibile in base alla taglia dell'animale e considerare la viscosità del prodotto nella scelta del calibro dell'ago.
- Distribuire più somministrazioni a distanza di alcuni centimetri oppure eseguirle su lati opposti dell'animale, per evitare di concentrare il trattamento in un'unica area.

NOTA: **Le informazioni riportate in questa sezione sono state raccolte da diverse fonti e con la massima attenzione.Si raccomanda sempre di consultare il proprio veterinario per una somministrazione per iniezione corretta e sicura.**

Siringhe con portaflacone e protezione

La disponibilità immediata del trattamento direttamente sul dispositivo consente di ridurre i tempi di preparazione e velocizzare le somministrazioni nelle attività che richiedono interventi rapidi e frequenti. Le siringhe con portaflacone e protezione sono sviluppate per rendere più scorrevole il lavoro quotidiano, soprattutto nei contesti dinamici dell'allevamento.

La configurazione compatta si adatta bene alle routine che prevedono frequenti spostamenti tra animali o reparti differenti. L'assenza di collegamenti esterni rende il sistema immediatamente operativo anche nelle situazioni più rapide, mentre la protezione dell'ago contribuisce a migliorare la sicurezza durante le applicazioni ripetute.

Il portaflacone integrato mantiene il prodotto sempre disponibile senza richiedere ricariche continue o preparazioni aggiuntive. Questo approccio permette di lavorare con maggiore ordine e rapidità, riducendo le interruzioni durante le sessioni operative più movimentate.

Ideali per le attività che richiedono velocità di esecuzione, semplicità d'uso e maggiore sicurezza nelle somministrazioni frequenti.

SIRINGA SIMCRO VS A DOSE FISSA CON PORTAFLACONE E PROTEZIONE AGO

Il kit include:

- ✓ 1 siringa
- ✓ 4 fascette colorate di identificazione
- ✓ 2 strumenti colorati (rosso e grigio) per il fissaggio e la rimozione dell'ago, disponibili solo per le versioni da 0.5, 1 e 2 ml

Volume: 0.5 ml, 1 ml, 2 ml, 5 ml
Intervallo di dosaggio: 0.5 ml, 1 ml, 2 ml, 5 ml
Regolazione del volume: fissa
Compatibile: con flaconi da 100 ml



0.5 ml - 850 0004-134 (ago da 1")
1 ml - 850 0004-135 (ago da 1")
2 ml - 850 0004-136 (ago da 1")
5 ml - 850 0004-137 (ago da 1.5")

SIRINGA SIMCRO ACCURUS A DOSAGGIO SELEZIONABILE (12 POSIZIONI) E PORTAFLACONE DA 6 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa
- ✓ 1 ghiera di montaggio per flacone da 20 mm, bianco
- ✓ 1 ghiera di montaggio per flacone da 30 mm, bianco
- ✓ 1 strumento per rimozione ago, rosso
- ✓ 1 guarnizione di ricambio O-ring

Volume: 6 ml
Intervallo di dosaggio: 0.5 ml – 6 ml
Incrementi: 0.5 ml
Regolazione del volume: selezionabile 12 posizioni
Compatibile: con flaconi da 100 ml



850 0000-379

Siringhe con tubo pescante e protezione

Le operazioni che coinvolgono elevati numeri di animali richiedono sistemi in grado di mantenere continuità durante le somministrazioni senza rallentare il ritmo di lavoro. Le siringhe con tubo pescante e protezione consentono di prelevare il prodotto direttamente dal flacone, evitando le interruzioni legate alla ricarica manuale del dispositivo.

Il sistema di pescaggio mantiene un'erogazione costante anche durante sessioni operative prolungate, caratteristica importante nei contesti in cui rapidità e regolarità devono convivere con volumi elevati di trattamento. Questo consente di dedicare maggiore attenzione all'esecuzione delle somministrazioni riducendo il tempo dedicato alle attività accessorie.

La protezione dell'ago rende il lavoro più sicuro durante le applicazioni ripetute e aiuta a migliorare la gestione operativa nei contesti dinamici o durante il trattamento consecutivo di gruppi numerosi.

Una soluzione adatta agli allevamenti che necessitano di rapidità, sicurezza e continuità nelle attività di trattamento ad alta frequenza.

SIRINGA SIMCRO VS A DOSE FISSA CON TUBO PESCANTE E PROTEZIONE AGO

Il kit include:

- ✓ 1 siringa
- ✓ 4 fascette colorate di identificazione
- ✓ 2 strumenti colorati (rosso e grigio) per il fissaggio e la rimozione dell'ago, disponibili solo per le versioni da 0.5, 1 e 2 ml
- ✓ 1 tappo di prelievo giallo (compatibile con flacone da 20 mm) e tubo pescante Ø 4.7 mm x 1500 mm
- ✓ 1 tappo di prelievo giallo (compatibile con flacone da 27 mm)

Volume: 0.5 ml, 1 ml, 2 ml, 5 ml
Intervallo di dosaggio: 0.5 ml, 1 ml, 2 ml, 5 ml
Regolazione del volume: fissa



0.5 ml – 850 0004-130 (ago da 1")
1 ml – 850 0004-131 (ago da 1")
2 ml – 850 0004-132 (ago da 1")
5 ml – 850 0004-133 (ago da 1.5")

SIRINGA SIMCRO ACCURUS A DOSAGGIO SELEZIONABILE ANTERIORMENTE (10 POSIZIONI) A TUBO PESCANTE DA 5 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa
- ✓ 1 tubo pescante Ø 6.4 mm x 1500 mm
- ✓ 1 guarnizione di ricambio O-ring
- ✓ 3 tappi di prelievo compatibili con flaconi da 20 mm, 27 mm e 33 mm

Volume: 5 ml
Intervallo di dosaggio: 0.5 ml – 5 ml
Incrementi: 0.5 ml
Regolazione del volume: dosaggio selezionabile anteriormente 10 posizioni



850 0000-377

Accessori e kit di ricambio siringhe Simcro VS

KIT DI CONVERSIONE DELLA DOSE DA 0.5 ML (REGOLABILE DA 0.1 ML A 0.5 ML CON INCREMENTI DI 0.05 ML)



Il kit include:

- ✓ 1 blister con pistoni (0.1 - 0.5 ml, incrementi di 0.05 ml) dotati di guarnizione O-ring
- ✓ 1 flacone di lubrificante

850 0004-638

KIT DI CONVERSIONE DELLA DOSE DA 1 ML (REGOLABILE DA 0.5 ML A 1 ML CON INCREMENTI DI 0.05 ML)



Il kit include:

- ✓ 1 blister con pistoni (0.5 – 1 ml, incrementi di 0.05 ml) dotati di guarnizione O-ring
- ✓ 1 flacone di lubrificante

850 0004-639

KIT DI CONVERSIONE DELLA DOSE DA 2 ML (REGOLABILE DA 1 ML A 2 ML CON INCREMENTI DI 0.1 ML)



Il kit include:

- ✓ 1 blister con pistoni (1 – 2 ml, incrementi di 0.1 ml) dotati di guarnizione O-ring
- ✓ 1 flacone di lubrificante

850 0004-640

KIT DI CONVERSIONE DELLA DOSE DA 5 ML (REGOLABILE DA 2 ML A 5 ML CON INCREMENTI DI 0.5 ML)



Il kit include:

- ✓ 1 blister con pistoni (2 – 5 ml, incrementi di 0.5 ml) dotati di guarnizione O-ring
- ✓ 1 flacone di lubrificante

850 0004-641

Montaggio del kit di conversione della dose

1. Rimuovere l'unità con protezione ago: impugnarla saldamente e tirarla in avanti mantenendo il corpo siringa fermo.

2. Rimuovere la camera di dosaggio: spingerla in avanti e verso il basso fino a sganciarla dal corpo siringa.

3. Svitare il tappo di fissaggio.

4. Con un cacciavite, spingere dal basso verso l'alto la testa del pistone per rimuovere il fermo e separarla dalla camera di dosaggio.

5. Scegliere la testa del pistone più appropriata, lubrificare l'O-ring e inserirla nella camera di dosaggio, fissandola con il tappo.

6. Reinserire il fermo e chiudere la camera di dosaggio avvitando nuovamente il tappo.

7. Reinserire la camera di dosaggio nel corpo siringa e riavvitare frontalmente l'unità con protezione ago.

NOTA: per rimuovere i pistoni dal blister, ruotarli finché non si staccano dal supporto plastico; lubrificare sempre gli O-ring prima dell'uso.

KIT ASSEMBLAGGIO VALVOLA PER MODELLI DA 0.5 ML E 1 ML



Il kit include:

- ✓ 1 valvola di ingresso
- ✓ 1 valvola di uscita
- ✓ 1 flacone di lubrificante

850 0004-138

KIT ASSEMBLAGGIO VALVOLA PER MODELLI DA 2 ML E 5 ML




Il kit include:

- ✓ 1 valvola di ingresso
- ✓ 1 valvola di uscita
- ✓ 1 flacone di lubrificante

850 0004-139

UNITÀ DI PROTEZIONE SENZA AGO

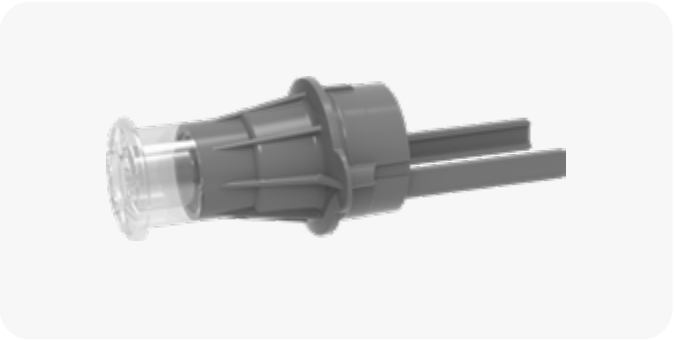

850 0004-140

PORTAFLACONE



Compatibile con flaconi da 100 ml

850 0004-142


PROTEZIONE AGO DA 1”



Con cappuccio protettivo frontale per uso intramuscolare

850 0004-315

PROTEZIONE AGO DA 1.5”

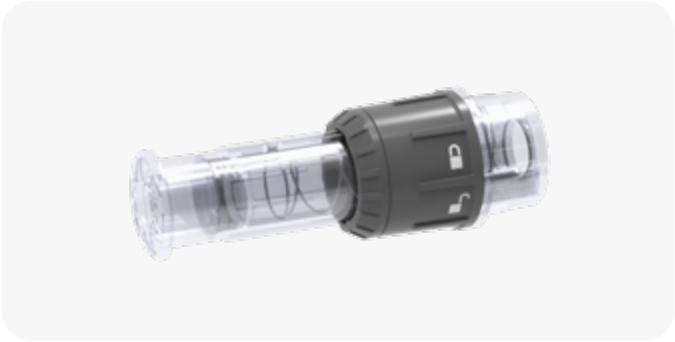

Con cappuccio protettivo frontale per uso intramuscolare

850 0004-316

CAPPUCCIO PROTETTIVO FRONTALE PER AGO INTRAMUSCOLARE




850 0004-317

CAPPUCCIO PROTETTIVO PER AGO SOTTO-CUTANEO CON SISTEMA AUTO-SOLLEVANTE




850 0004-636

CAMERA DI DOSAGGIO DA 0.5 ML PER SIRINGA CON TUBO PESCANTE

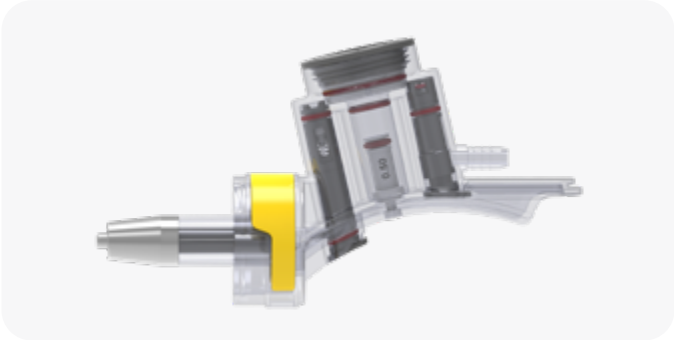


850 0013-967

CAMERA DI DOSAGGIO DA 1 ML PER SIRINGA CON TUBO PESCANTE

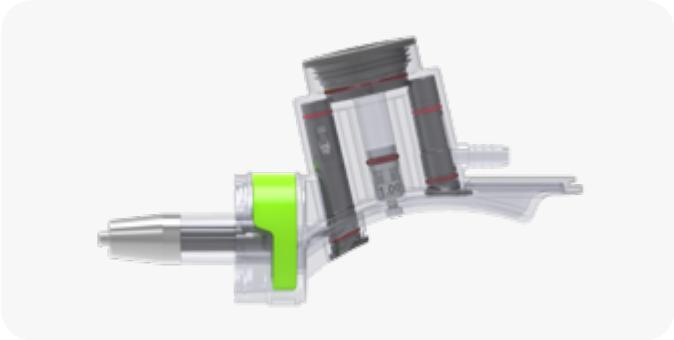


850 0013-968

CAMERA DI DOSAGGIO DA 2 ML PER SIRINGA CON TUBO PESCANTE

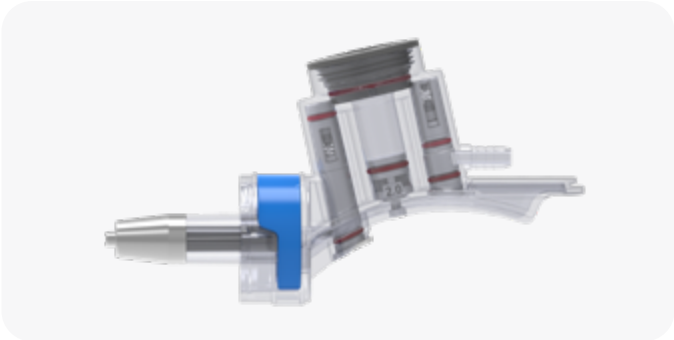

850 0013-969

CAMERA DI DOSAGGIO DA 5 ML PER SIRINGA CON TUBO PESCANTE

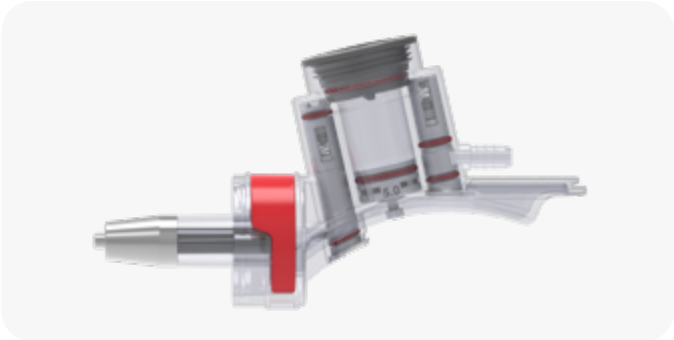

850 0013-971

Siringhe a ripetizione in plastica

Nelle attività caratterizzate da numerose somministrazioni consecutive, ridurre il peso del dispositivo può contribuire a rendere il lavoro più pratico durante l'intera giornata operativa. Le siringhe a ripetizione in plastica sono progettate per offrire agilità e semplicità nelle routine di trattamento più frequenti.

La struttura in plastica rende il sistema leggero e maneggevole, qualità apprezzata nelle sessioni operative prolungate o nei contesti in cui il ritmo delle applicazioni deve rimanere elevato e costante.

La configurazione essenziale permette di adattarsi rapidamente ai diversi protocolli terapeutici senza introdurre complessità nella preparazione o nell'utilizzo quotidiano, risultando adatta alle attività ripetitive distribuite su lunghi turni di lavoro.

Una scelta efficace quando velocità, leggerezza e praticità diventano aspetti centrali nelle somministrazioni quotidiane.

SIRINGA NJ PHILLIPS A RIPETIZIONE CON IMPUGNATURA A PISTOLA E CILINDRO IN POLISULFONE DA 25 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa
- ✓ 1 chiave per raccordo ago, blu
- ✓ 1 guarnizione di ricambio O-ring
- ✓ 1 flacone di lubrificante

Volume: 25 ml
Intervallo di dosaggio: 0.5 ml – 2.5 ml
Incrementi: 0.5 ml
Regolazione del volume: selezionabile 5 posizioni

850 0000-040



SIRINGA NJ PHILLIPS A RIPETIZIONE CON IMPUGNATURA A PISTOLA E CILINDRO IN POLISULFONE DA 50 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa
- ✓ 1 chiave per raccordo ago, blu
- ✓ 1 guarnizione di ricambio O-ring
- ✓ 1 flacone di lubrificante

Volume: 50 ml
Intervallo di dosaggio: 1 ml – 5 ml
Incrementi: 1 ml
Regolazione del volume: selezionabile 5 posizioni

850 0000-041



SIRINGA NJ PHILLIPS A RIPETIZIONE CON IMPUGNATURA A PISTOLA E CILINDRO IN POLIPROPILENE DA 25 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa
- ✓ 1 chiave per raccordo ago, blu
- ✓ 1 guarnizione di ricambio O-ring
- ✓ 1 flacone di lubrificante

Volume: 25 ml
Intervallo di dosaggio: 0.5 ml – 2.5 ml
Incrementi: 0.5 ml
Regolazione del volume: selezionabile 5 posizioni

850 0000-044



SIRINGA NJ PHILLIPS A RIPETIZIONE CON IMPUGNATURA A PISTOLA E CILINDRO IN POLIPROPILENE DA 50 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa
- ✓ 1 chiave per raccordo ago, blu
- ✓ 1 guarnizione di ricambio O-ring
- ✓ 1 flacone di lubrificante

Volume: 50 ml
Intervallo di dosaggio: 1 ml – 5 ml
Incrementi: 1 ml
Regolazione del volume: selezionabile 5 posizioni

850 0000-045





Siringhe a ripetizione in metallo

Le attività più intensive richiedono dispositivi progettati per sostenere utilizzi frequenti mantenendo affidabilità e stabilità nel tempo. Le siringhe a ripetizione in metallo nascono per garantire continuità nelle operazioni anche durante sessioni caratterizzate da elevati volumi di trattamento.

La struttura metallica assicura maggiore resistenza all'usura e rende queste soluzioni adatte ai contesti in cui il dispositivo viene impiegato continuativamente nel corso della giornata.

La risposta costante del sistema contribuisce a mantenere ordine ed efficienza anche nelle routine più impegnative, caratterizzate da numerose somministrazioni consecutive e ritmi di lavoro sostenuti.

Pensate per le realtà operative che richiedono lunga durata del dispositivo, utilizzo intensivo e maggiore solidità nelle attività quotidiane di trattamento.

SIRINGA NJ PHILLIPS A RIPETIZIONE CON IMPUGNATURA EZI-GRIP E CILINDRO IN POLISULFONE DA 25 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa
- ✓ 1 chiave per raccordo ago, blu
- ✓ 1 guarnizione di ricambio O-ring
- ✓ 1 flacone di lubrificante

Volume: 25 ml
Intervallo di dosaggio: 0.5 ml – 2.5 ml
Incrementi: 0.5 ml
Regolazione del volume: selezionabile 5 posizioni

850 0000-440



SIRINGA NJ PHILLIPS A RIPETIZIONE CON IMPUGNATURA EZI-GRIP E CILINDRO IN POLISULFONE DA 50 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa
- ✓ 1 chiave per raccordo ago, blu
- ✓ 1 guarnizione di ricambio O-ring
- ✓ 1 flacone di lubrificante

Volume: 50 ml
Intervallo di dosaggio: 1 ml – 5 ml
Incrementi: 1 ml
Regolazione del volume: selezionabile 5 posizioni

850 0000-423



SIRINGA NJ PHILLIPS A RIPETIZIONE CON IMPUGNATURA EZI-GRIP PER TUBERCOLINA DA 2 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa
- ✓ 1 confezione da 12 aghi intradermici – 22G x 1/2" (attacco da 11.4 mm)
- ✓ 1 ghiera per ago (4 mm)
- ✓ 1 ghiera per ago (7 mm)
- ✓ 1 pomello rosso
- ✓ 1 cilindro di ricambio
- ✓ 1 chiave per raccordo ago, blu
- ✓ 1 flacone di lubrificante

Volume: 2 ml
Intervallo di dosaggio: 0.1 ml
Regolazione del volume: fissa

Consigliamo di utilizzare con aghi per tubercolina (850 0013-952)

850 0000-649



AGHI PER TUBERCOLINA

Il kit include:

- ✓ 1 confezione da 12 aghi intradermici – 22G x 1/2" (attacco da 11.4 mm)

850 0013-952 (Confezione 12 pz.)



Accessori e kit di ricambio

POMELLI COLORATI



850 0000-000 (Confezione 4 pz.)

GUARNIZIONI O-RING



25 ml - 850 0000-140 (Confezione 5 pz.)
50 ml - 850 0000-143 (Confezione 5 pz.)

KIT DI RICAMBIO CON CILINDRO IN POLISULFONE



Il kit include:

- ✓ 1 cilindro con attacco Luer lock in metallo
- ✓ 1 guarnizione O-ring

25 ml - 850 0000-058
50 ml - 850 0000-054

KIT DI RICAMBIO CON CILINDRO IN POLIPROPILENE



Il kit include:

- ✓ 1 cilindro con attacco Luer lock in metallo
- ✓ 1 guarnizione O-ring
- ✓ 1 chiave per raccordo ago, blu

25 ml - 850 0000-232
50 ml - 850 0000-057

Siringhe in plastica con portaflacone

Avere il trattamento direttamente integrato sul dispositivo permette di ridurre i tempi di preparazione e rendere più immediate le somministrazioni nelle attività quotidiane di allevamento. Le siringhe in plastica con portaflacone sono sviluppate per supportare interventi rapidi e frequenti senza complicare l'operatività.

La configurazione compatta si dimostra pratica negli interventi distribuiti su piccoli gruppi o nelle attività che prevedono frequenti spostamenti tra animali e reparti differenti. L'assenza di tubazioni esterne rende il sistema immediatamente pronto all'uso.

La struttura leggera agevola l'utilizzo ripetuto durante la giornata, qualità apprezzata nelle routine che richiedono rapidità di esecuzione e semplicità nelle operazioni.

Rappresentano una proposta pratica e immediata per gli allevamenti che privilegiano leggerezza, semplicità e rapidità nelle attività di trattamento quotidiano.

SIRINGA SIMCRO PREMIUM A DOSAGGIO SELEZIONABILE ANTERIORMENTE (10 POSIZIONI) CON PORTAFLACONE DA 0.5 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa
- ✓ 2 ghiere di bloccaggio per flaconi da 20 mm e 30 mm, bianco
- ✓ 2 guarnizioni di ricambio O-ring

Volume: 0.5 ml
Intervallo di dosaggio: 0.05 ml – 0.5 ml
Incrementi: 0.05 ml
Regolazione del volume: selezionabile anteriormente 10 posizioni
Compatibile: con flaconi da 100 ml

850 0000-416



SIRINGA SIMCRO PREMIUM CON DOSAGGIO SELEZIONABILE ANTERIORMENTE (20 POSIZIONI) CON PORTAFLACONE DA 2 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa
- ✓ 2 ghiere di bloccaggio per flaconi da 20 mm e 30 mm, bianco
- ✓ 2 guarnizioni di ricambio O-ring

Volume: 2 ml
Intervallo di dosaggio: 0.1 ml – 2 ml
Incrementi: 0.1 ml
Regolazione del volume: selezionabile anteriormente 20 posizioni
Compatibile: con flaconi da 100 ml

850 0000-417



SIRINGA SIMCRO PREMIUM A CARICAMENTO ANTERIORE E DOSAGGIO SELEZIONABILE (12 POSIZIONI) CON PORTAFLACONE DA 6 ML



Il kit include:

- ✓ 1 siringa
- ✓ 2 ghiere di bloccaggio per flaconi da 20 mm e 30 mm, bianco
- ✓ 2 guarnizioni di ricambio O-ring

Volume: 6 ml
Intervallo di dosaggio: 0.5 ml – 6 ml
Incrementi: 0.5 ml
Regolazione del volume: selezionabile 12 posizioni
Compatibile: con flaconi da 100 ml

850 0000-418

SIRINGA SIMCRO ULTIMATE-BMV CON DOSAGGIO SELEZIONABILE ANTERIORMENTE (12 POSIZIONI) CON PORTAFLACONE DA 2 ML



Il kit include:

- ✓ 1 siringa
- ✓ 1 ghiera di bloccaggio per flaconi da 20 mm, verde

Volume: 2 ml
Intervallo di dosaggio: 0.2 ml – 2 ml
Incrementi: 0.2 – 0.4 – 0.5 – 0.6 – 0.8 – 1 – 1.2 – 1.4 – 1.5 – 1.6 – 1.8 – 2 ml
Regolazione del volume: selezionabile anteriormente 12 posizioni

850 0000-454

SIRINGA SIMCRO ULTIMATE-BMV CON DOSAGGIO SELEZIONABILE ANTERIORMENTE (12 POSIZIONI) CON PORTAFLACONE DA 6 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa
- ✓ 1 ghiera di bloccaggio per flaconi da 20 mm, verde

Volume: 6 ml
Intervallo di dosaggio: 0.5 ml –6 ml
Incrementi: 0.5 ml
Regolazione del volume: selezionabile anteriormente 12 posizioni

850 0000-455



SIRINGA SIMCRO BMV A DOSAGGIO REGOLABILE CON PORTAFLACONE DA 0.5 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa
- ✓ 2 ghiere di bloccaggio per flaconi da 20 mm e 30 mm, verde

Volume: 0.5 ml
Intervallo di dosaggio: 0.1 ml – 0.5 ml
Incrementi: 0.1 ml
Regolazione del volume: regolabile

850 0000-456



SIRINGA SIMCRO BMV A DOSAGGIO REGOLABILE CON PORTAFLACONE DA 2 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa
- ✓ 2 ghiere di bloccaggio per flaconi da 20 mm e 30 mm, verde

Volume: 2 ml
Intervallo di dosaggio: 0.2 ml – 2 ml
Incrementi: 0.2 ml
Regolazione del volume: regolabile



850 0000-457

Accessori e kit di ricambio

KIT PORTAFLACONE SIRINGA SIMCRO PREMIUM




Il kit include:

- ✓ 2 ghiere di bloccaggio per flaconi da 20 mm e 30 mm
- ✓ 1 portaflacone compatibile con flaconi da 100 ml

850 0000-399


GHIERA DI BLOCCAGGIO DA 30 MM PER PORTAFLACONE - SIRINGA SIMCRO ULTIMATE-BMV

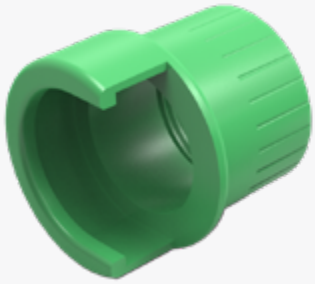

Articolo venduto sfuso

850 0000-400

GHIERA DI BLOCCAGGIO DA 33 MM PER PORTAFLACONE - SIRINGA SIMCRO ULTIMATE-BMV

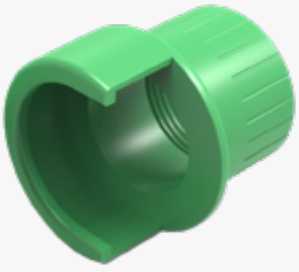

Articolo venduto sfuso

850 0000-402

PORTAFLACONE PER SIRINGHE SIMCRO ULTIMATE-BMV E SIRINGHE NJ PHILLIPS IN METALLO



Compatibile con flaconi da 100 ml.
Articolo venduto sfuso

850 0000-453

Siringhe in metallo con portaflacone

Le attività caratterizzate da utilizzo frequente e continuativo richiedono sistemi che combinino praticità operativa e maggiore resistenza nel tempo. Le siringhe in metallo con portaflacone uniscono la disponibilità immediata del trattamento alla solidità di una struttura progettata per sostenere ritmi di lavoro elevati.

Il sistema mantiene il prodotto sempre disponibile senza collegamenti esterni o preparazioni aggiuntive, rendendo più rapida la sequenza delle somministrazioni quotidiane e contribuendo a un'organizzazione più ordinata delle attività ripetute.

La costruzione metallica garantisce robustezza e resistenza all'usura, risultando adatta ai contesti in cui il dispositivo viene utilizzato intensivamente e deve mantenere affidabilità anche nelle condizioni operative più impegnative.

La scelta ideale per chi cerca un sistema resistente e immediatamente operativo nelle attività caratterizzate da utilizzo continuativo e ritmi di lavoro elevati.

SIRINGA NJ PHILLIPS IN METALLO A DOSAGGIO VARIABILE CON PORTAFLACONE DA 1 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa
- ✓ 3 ghiere di bloccaggio per flacone da 20 mm, 30 mm e 33 mm, blu
- ✓ 1 guarnizione di ricambio O-ring
- ✓ 1 chiave per raccordo ago e flacone
- ✓ 1 ghiera per ago, doppia fessura
- ✓ 1 flacone di lubrificante

Volume:1 ml
Intervallo di dosaggio: 0.2 ml – 1 ml
Incrementi: 0.2 ml
Regolazione del volume: variabile
Compatibile: con flaconi da 100 ml

850 0000-679



SIRINGA NJ PHILLIPS IN METALLO A DOSAGGIO VARIABILE CON PORTAFLACONE DA 2 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa
- ✓ 3 ghiere di bloccaggio per flacone da 20 mm, 30 mm e 33 mm, blumm, blu
- ✓ 1 guarnizione di ricambio O-ring
- ✓ 1 chiave per raccordo ago e flacone
- ✓ 1 ghiera per ago, doppia fessura
- ✓ 1 flacone di lubrificante

Volume: 2 ml
Intervallo di dosaggio: 0.1 ml – 2 ml
Incrementi: 0.1 ml
Regolazione del volume: variabile
Compatibile: con flaconi da 100 ml

850 0000-014



SIRINGA NJ PHILLIPS IN METALLO A DOSAGGIO VARIABILE CON PORTAFLACONE DA 5 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa
- ✓ 3 ghiere di bloccaggio per flacone da 20 mm, 30 mm e 33 mm, blu
- ✓ 1 guarnizione di ricambio O-ring
- ✓ 1 chiave per raccordo ago e flacone
- ✓ 1 ghiera per ago, doppia fessura
- ✓ 1 flacone di lubrificante

Volume: 5 ml
Intervallo di dosaggio: 0.5 ml – 5 ml
Incrementi: 0.5 ml
Regolazione del volume: variabile
Compatibile: con flaconi da 100 ml

850 0000-015



Accessori e kit di ricambio

PORTAFLACONE PER SIRINGHE SIMCRO ULTIMATE-BMV E SIRINGHE NJ PHILLIPS IN METALLO

Compatibile con flaconi da 100 ml.
Articolo venduto sfuso

850 0000-453



KIT DI RICAMBIO PER SIRINGA NJ PHILLIPS IN METALLO DA 1 ML CON PORTAFLACONE E TUBO PESCANTE

Il kit include:

- ✓ 1 cilindro da 1 ml
- ✓ 2 valvole con guarnizioni O-ring
- ✓ 2 molle della valvola
- ✓ 4 guarnizioni O-ring
- ✓ 1 molla di ritorno
- ✓ 1 kit portaflacone con valvole, molla e guarnizioni O-ring

850 0001-326



KIT DI RICAMBIO PER SIRINGA NJ PHILLIPS IN METALLO DA 2 ML CON PORTAFLACONE E TUBO PESCANTE

Il kit include:

- ✓ 1 cilindro da 2 ml
- ✓ 2 valvole con guarnizioni O-ring
- ✓ 2 molle della valvola
- ✓ 4 guarnizioni O-ring
- ✓ 1 molla di ritorno
- ✓ 1 kit portaflacone con valvole, molla e guarnizioni O-ring

850 0000-435




KIT DI RICAMBIO PER SIRINGA NJ PHILLIPS IN METALLO DA 5 ML CON PORTAFLACONE E TUBO PESCANTE

Il kit include:

- ✓ 1 cilindro da 5 ml
- ✓ 2 valvole con guarnizioni O-ring
- ✓ 1 molla della valvola
- ✓ 1 molla di ritorno
- ✓ 1 guarnizione di raccordo della testa
- ✓ 3 guarnizioni O-ring
- ✓ 1 kit portaflacone con valvole, molla e guarnizioni O-ring

850 0000-231

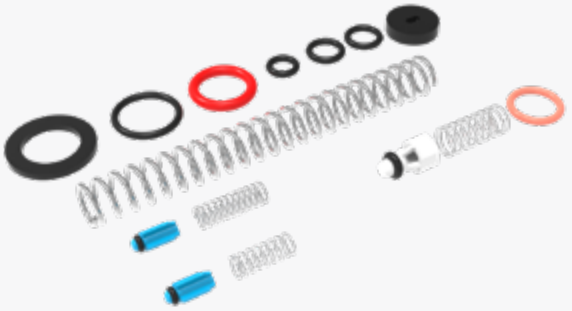

Siringhe in plastica con tubo pescante

Mantenere il prodotto costantemente disponibile durante il trattamento aiuta a rendere più fluida l'organizzazione delle somministrazioni su gruppi numerosi di animali. Le siringhe in plastica con tubo pescante consentono di lavorare direttamente dal flacone evitando interruzioni dovute alla ricarica manuale del dispositivo.

Questa configurazione si dimostra vantaggiosa nelle sessioni operative più lunghe, dove rapidità e regolarità devono convivere con semplicità d'uso e praticità operativa. Il sistema di pescaggio permette infatti di dedicare maggiore attenzione al trattamento riducendo il tempo necessario per le operazioni accessorie.

La struttura in plastica contribuisce a contenere il peso complessivo della siringa, caratteristica apprezzata soprattutto nelle attività intensive o nei contesti in cui l'operatore si sposta frequentemente tra animali e reparti differenti. Le diverse configurazioni disponibili permettono inoltre di gestire applicazioni differenti, inclusi trattamenti ad alta viscosità o attività specifiche su piccoli animali.

Trovano applicazione soprattutto nelle routine che richiedono rapidità di esecuzione, continuità del trattamento e maggiore leggerezza durante sessioni con elevati numeri di somministrazioni.

SIRINGA SIMCRO PREMIUM A DOSAGGIO SELEZIONABILE (18 POSIZIONI) CON TUBO PESCANTE DA 2 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa
- ✓ 3 tappi di prelievo, compatibili con flaconi da 20 mm, 27 mm e 33 mm
- ✓ 1 tubo pescante Ø 4.7 mm x 1220 mm
- ✓ 1 guarnizione di ricambio O-ring

Volume: 2 ml
Intervallo di dosaggio: 0.3 ml – 2 ml
Incrementi: 0.1 ml
Regolazione del volume: selezionabile 18 posizioni

850 0000-412



SIRINGA SIMCRO PREMIUM CON DOSAGGIO SELEZIONABILE ANTERIORMENTE (10 POSIZIONI) CON TUBO PESCANTE DA 5 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa
- ✓ 3 tappi di prelievo, compatibili con flaconi da 20 mm, 27 mm e 33 mm
- ✓ 1 tubo pescante Ø 4.7 mm x 1200 mm
- ✓ 1 guarnizione di ricambio O-ring

Volume: 5 ml
Intervallo di dosaggio: 0.5 ml – 5 ml
Incrementi: 0.5 ml
Regolazione del volume: selezionabile anteriormente 10 posizioni

850 0000-413



SIRINGA SIMCRO PREMIUM PER SOLUZIONI AD ALTA VISCOSITÀ E DOSAGGIO SELEZIONABILE (20 POSIZIONI) CON TUBO PESCANTE DA 12 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa
- ✓ 3 tappi di prelievo, compatibili con flaconi da 20 mm, 30 mm e 33 mm
- ✓ 1 tubo pescante Ø 6.4 mm x 1500 mm
- ✓ 1 guarnizione di ricambio O-ring

Volume: 12 ml
Intervallo di dosaggio: 2.5 ml – 12 ml
Incrementi: 0.5 ml
Regolazione del volume: selezionabile 20 posizioni



850 0000-414

SIRINGA NJ PHILLIPS HANDY VERDE A DOSAGGIO VARIABILE CON TUBO PESCANTE DA 1 ML

Il kit include:

- ✓ 10 siringhe
- ✓ 10 chiavi per raccordo ago, blu

Volume: 1 ml
Intervallo di dosaggio: 0.1 ml – 1 ml
Incrementi: 0.1 ml
Regolazione del volume: variabile



850 0000-643 (Confezione 10 pz.)

SIRINGA NJ PHILLIPS HANDY ROSA A DOSAGGIO VARIABILE CON TUBO PESCANTE DA 2 ML

Il kit include:

- ✓ 10 siringhe
- ✓ 10 chiavi per raccordo ago, blu

Volume: 2 ml
Intervallo di dosaggio: 0.1 ml – 2 ml
Incrementi: 0.1 ml
Regolazione del volume: variabile



850 0000-644 (Confezione 10 pz.)

SIRINGA NJ PHILLIPS HANDY BLU A DOSAGGIO VARIABILE CON TUBO PESCANTE DA 5 ML

Il kit include:

- ✓ 10 siringhe
- ✓ 10 chiavi per raccordo ago, blu

Volume: 5 ml
Intervallo di dosaggio: 0.25 ml – 5 ml
Incrementi: 0.25 ml
Regolazione del volume: variabile



850 0000-646 (Confezione 10 pz.)

Siringhe in metallo con tubo pescante

Lavorare su elevati numeri di animali richiede dispositivi progettati per sostenere utilizzi frequenti e prolungati senza compromettere affidabilità e stabilità del trattamento. Le siringhe in metallo con tubo pescante combinano pescaggio continuo e robustezza strutturale per rispondere a queste esigenze operative.

Il collegamento diretto al flacone consente di mantenere il prodotto costantemente disponibile durante le somministrazioni, rendendo più regolare l'esecuzione delle operazioni e riducendo le interruzioni nelle sessioni di trattamento più intensive.

La struttura metallica garantisce resistenza all'usura e rende il dispositivo adatto agli allevamenti o alle attività in cui il sistema viene utilizzato intensivamente nel tempo. La solidità costruttiva contribuisce inoltre a mantenere affidabilità anche nelle routine più gravose.

Una proposta sviluppata per le attività che richiedono pescaggio continuo, utilizzo intensivo e lunga durata del dispositivo anche nelle condizioni operative più impegnative.

SIRINGA NJ PHILLIPS IN METALLO A DOSAGGIO VARIABILE CON TUBO PESCANTE PER POLLAME DA 0.5 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa
- ✓ 1 kit di aspirazione con ago
- ✓ 1 tubo pescante Ø 4.8 mm x 914 mm
- ✓ 1 chiave per raccordo ago, blu
- ✓ 1 ghiera per ago, doppia fessura
- ✓ 1 flacone di lubrificante
- ✓ 1 kit di manutenzione con cilindro, guarnizioni O-ring, valvole di ingresso con O-ring e molle delle valvole di ingresso

Volume: 0.5 ml
Intervallo di dosaggio: 0.1 ml – 0.5 ml
Incrementi: 0.1 ml
Regolazione del volume: variabile

850 0000-427



SIRINGA NJ PHILLIPS IN METALLO A DOSAGGIO VARIABILE CON TUBO PESCANTE DA 1 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa
- ✓ 1 tubo pescante Ø 4.8 mm x 800 mm
- ✓ 1 chiave per raccordo ago, blu
- ✓ 1 ghiera per ago, doppia fessura
- ✓ 1 flacone di lubrificante
- ✓ 2 guarnizioni di ricambio O-ring

Volume: 1 ml
Intervallo di dosaggio: 0.2 ml – 1 ml
Incrementi: 0.2 ml
Regolazione del volume: variabile

850 0000-678



SIRINGA NJ PHILLIPS IN METALLO A DOSAGGIO VARIABILE CON TUBO PESCANTE DA 2 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa
- ✓ 1 tubo pescante Ø 4.8 mm x 800 mm
- ✓ 1 guarnizione di ricambio O-ring
- ✓ 1 chiave per raccordo ago, blu
- ✓ 1 ghiera per ago, doppia fessura
- ✓ 1 flacone di lubrificante

Volume: 2 ml
Intervallo di dosaggio: 0.1 ml – 2 ml
Incrementi: 0.1 ml
Regolazione del volume: variabile

850 0000-012



SIRINGA NJ PHILLIPS IN METALLO A DOSAGGIO VARIABILE CON TUBO PESCANTE DA 5 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa
- ✓ 1 tubo pescante Ø 4.8 mm x 800 mm
- ✓ 1 guarnizione di ricambio O-ring
- ✓ 1 chiave per raccordo ago, blu
- ✓ 1 ghiera per ago, doppia fessura
- ✓ 1 flacone di lubrificante

Volume: 5 ml
Intervallo di dosaggio: 0.5 ml – 5 ml
Incrementi: 0.5 ml
Regolazione del volume: variabile

850 0000-013




Accessori e kit di ricambio

KIT DI RICAMBIO PER SIRINGA NJ PHILLIPS IN METALLO CON TUBO PESCANTE PER POLLAME DA 0.5 ML

Il kit include:

- ✓ 1 cilindro da 0.5 ml
- ✓ 4 guarnizione di ricambio O-ring
- ✓ 2 molle della valvola di ingresso
- ✓ 2 molle della valvola di ingresso con guarnizione O-ring

850 0003-989

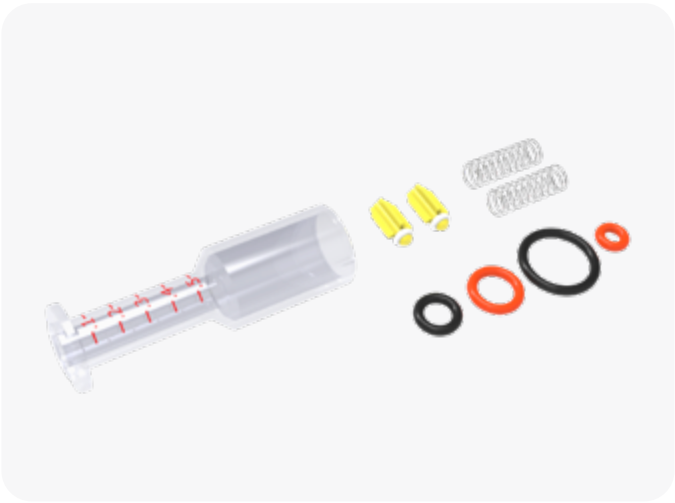

KIT DI RICAMBIO PER SIRINGA NJ PHILLIPS IN METALLO CON PORTAFLACONE O CON TUBO PESCANTE DA 2 ML

Il kit include:

- ✓ 1 cilindro da 2 ml
- ✓ 2 valvole con guarnizioni O-ring
- ✓ 2 molle della valvola
- ✓ 4 guarnizioni O-ring
- ✓ 1 molla di ritorno
- ✓ 1 kit portaflacone con valvole, molla e guarnizioni O-ring

850 0000-435




KIT DI RICAMBIO PER SIRINGA NJ PHILLIPS IN METALLO CON TUBO PESCANTE DA 5 ML

Il kit include:

- ✓ 1 cilindro da 5 ml
- ✓ 1 guarnizione O-ring
- ✓ 2 guarnizioni pistone
- ✓ 1 guarnizione di supporto coppa
- ✓ 1 guarnizione di testa

850 0000-428

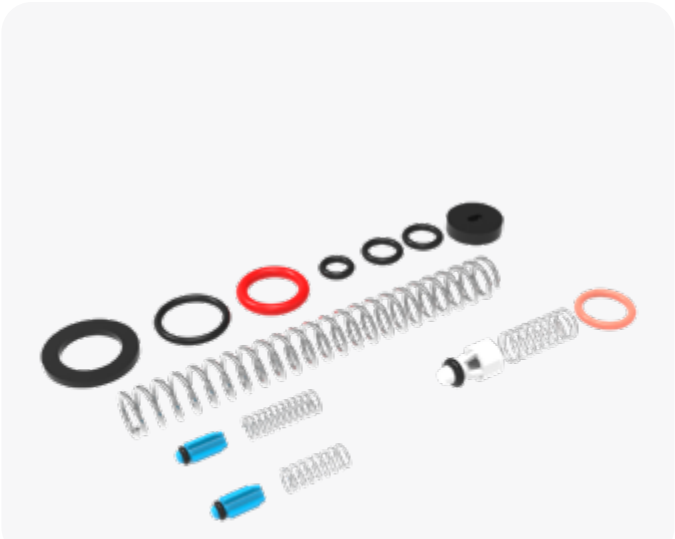

Siringhe in nylon

Semplificare le operazioni quotidiane può fare la differenza nelle attività di trattamento più frequenti, soprattutto quando rapidità e immediatezza diventano priorità operative. Le siringhe in nylon sono progettate per offrire una soluzione essenziale e pratica, facilmente integrabile nelle normali routine dell'allevamento.

Il riempimento frontale consente di preparare rapidamente il dispositivo e rende più rapido il passaggio tra una somministrazione e l'altra, caratteristica adatta alle attività che non richiedono sistemi di pescaggio continuo o configurazioni più articolate.

La struttura in nylon combina leggerezza e praticità d'uso, rendendo il dispositivo semplice da utilizzare anche nelle operazioni ripetitive e nei trattamenti distribuiti durante l'intera giornata. La semplicità costruttiva riduce inoltre tempi di preparazione e manutenzione, favorendo un utilizzo immediato nelle attività più frequenti.

Rappresentano una scelta concreta per gli allevamenti che privilegiano semplicità, rapidità e facilità di utilizzo nelle attività di trattamento quotidiano.

SIRINGA SIMCRO IN NYLON A DOSAGGIO VARIABILE DA 5 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa
- ✓ 2 guarnizioni di ricambio O-ring

Volume: 5 ml
Intervallo di dosaggio: 0.0 – 0.5 ml
Incrementi: 1 ml
Regolazione del volume: variabile

850 0004-576



SIRINGA SIMCRO IN NYLON A DOSAGGIO VARIABILE DA 10 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa
- ✓ 2 guarnizioni di ricambio O-ring

Volume: 10 ml
Intervallo di dosaggio: 1 ml – 10 ml
Incrementi: 1 ml
Regolazione del volume: variabile

850 0004-577



SIRINGA SIMCRO IN NYLON A DOSAGGIO VARIABILE DA 20 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa
- ✓ 2 guarnizioni di ricambio O-ring

Volume: 20 ml
Intervallo di dosaggio: 1 – 20 ml
Incrementi: 1 ml
Regolazione del volume: variabile

850 0004-578



SIRINGA SIMCRO IN NYLON A DOSAGGIO VARIABILE DA 30 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa
- ✓ 2 guarnizioni di ricambio O-ring

Volume: 30 ml
Intervallo di dosaggio: 1 ml – 30 ml
Incrementi: 1 ml
Regolazione del volume: variabile

850 0004-579



SIRINGA SIMCRO IN NYLON A DOSAGGIO VARIABILE DA 50 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa
- ✓ 2 guarnizioni di ricambio O-ring

Volume: 50 ml
Intervallo di dosaggio: 5 ml – 50 ml
Incrementi: 5 ml
Regolazione del volume: variabile

850 0004-580



UGELLO COMPATIBILE CON SIRINGA IN NYLON

Il kit include:

- ✓ 1 ugello
- ✓ 2 guarnizioni di ricambio O-ring

850 0004-581



Accessori e kit di ricambio per tutte le siringhe

KIT ASPIRAZIONE PER SIRINGHE CON TUBO PESCANTE

Il kit include:

- ✓ 3 tappi di prelievo, compatibili con flaconi da 20 mm, 30 mm e 33 mm
- ✓ 1 tubo pescante Ø 4.7 mm x 1220 mm
- ✓ 1 tubo pescante Ø 6.4 mm x 1200 mm

850 0000-405



ATTACCO ESTENSORE HANDI-JECT

Il kit include:

- ✓ 1 tubo pescante da 1000 mm

850 0000-409



LUBRIFICANTE

Il kit include:

- ✓ 2 flaconi da 15 ml

850 0001-220



Siringa multifunzione

Alternare applicazioni iniettive, orali e topiche nel corso della stessa giornata può rendere più complessa l'organizzazione delle attività e aumentare il numero di strumenti necessari durante il lavoro. La siringa multifunzione nasce per semplificare questo tipo di operatività, permettendo di utilizzare un unico dispositivo per modalità di somministrazione differenti.

La possibilità di riconfigurare rapidamente il sistema consente di passare da un'applicazione all'altra senza sostituire completamente lo strumento, soluzione apprezzata nei contesti in cui i protocolli terapeutici cambiano frequentemente o coinvolgono trattamenti differenti su gruppi diversi di animali.

Il sistema con tubo pescante mantiene il prodotto costantemente disponibile anche durante sessioni operative articolate, mentre gli accessori dedicati ampliano le possibilità di utilizzo senza appesantire l'operatività o rallentare il ritmo delle attività quotidiane.

La soluzione ideale per gli allevamenti che desiderano ridurre il numero di strumenti mantenendo versatilità nelle diverse modalità di trattamento.

SIRINGA SIMCRO OPTIMISER MULTIFUNZIONE (SIRINGA/ ORALE/TOPICO) A DOSAGGIO SELEZIONABILE (24 POSIZIONI) CON TUBO PESCANTE DA 15 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa con attacco Luer Lock in metallo
- ✓ 1 tubo pescante Ø 6,4 mm x 1200 mm
- ✓ 3 tappi di prelievo, compatibili con flaconi da 20 mm, 30 mm e 33 mm
- ✓ 1 ugello orale in metallo da 86 mm
- ✓ 1 ugello dritto topico in plastica da 57 mm
- ✓ 1 ugello topico a T

Volume: 15 ml
Intervallo di dosaggio: 1 ml – 15 ml
Incrementi: 1 – 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 3.5 – 4 – 4.5 – 5 – 5.5 – 6 – 6.5 – 7 – 7.5 – 8 – 8.5 – 9 – 9.5 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 ml
Regolazione del volume: selezionabile 24 posizioni

850 0004-021



Dosatori multifunzione orali e topici

Gestire trattamenti orali e topici con strumenti separati può rallentare le attività quotidiane e aumentare la complessità organizzativa, soprattutto nelle routine operative che prevedono applicazioni differenti nel corso della stessa giornata. I dosatori multifunzione orali e topici permettono di utilizzare un unico sistema adattabile a modalità di somministrazione diverse, semplificando il lavoro in allevamento.

Il collegamento tramite tubo pescante consente di lavorare direttamente dal flacone mantenendo una disponibilità continua del prodotto, soluzione adatta durante sessioni operative su gruppi numerosi di animali o trattamenti che richiedono elevata frequenza di applicazione.

La possibilità di sostituire rapidamente ugelli e accessori rende più semplice il passaggio tra somministrazione orale e distribuzione topica, contribuendo a ridurre il numero di strumenti necessari durante le attività quotidiane.

Particolarmente adatti alle realtà operative che richiedono flessibilità, rapidità di adattamento e organizzazione semplificata di differenti modalità di applicazione.

DOSATORE ORALE E TOPICO SIMCRO MK2 A DOSAGGIO VARIABILE CON TUBO PESCANTE DA 20 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa
- ✓ 1 tubo pescante Ø 6,4 mm x 1500 mm
- ✓ 2 molle anti-piega
- ✓ 1 ugello a T
- ✓ 1 ugello topico con beccuccio
- ✓ 1 ugello di metallo
- ✓ 1 guarnizione di ricambio O-ring

Volume: 20 ml
Intervallo di dosaggio: 1 ml – 20 ml
Incrementi: 1 ml
Regolazione del volume: variabile

850 0000-382



DOSATORE ORALE E TOPICO SIMCRO MK2 A DOSAGGIO REGOLABILE CON TUBO PESCANTE DA 30 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa con spray a ventaglio
- ✓ 1 tubo pescante Ø 6,4 mm x 1200 mm EPDM/nero
- ✓ 2 molle anti-piega
- ✓ 1 ugello topico con beccuccio
- ✓ 1 ugello orale da 100 mm

Volume: 30 ml
Intervallo di dosaggio: 4 ml – 30 ml
Incrementi: 1 ml
Regolazione del volume: variabile

850 0000-383




DOSATORE ORALE E TOPICO SIMCRO A DOSAGGIO SELEZIONABILE (24 POSIZIONI) CON TUBO PESCANTE DA 65 ML

Il kit include:

- ✓ 1 dosatore con ugello topico e gancio
- ✓ 1 tubo pescante Ø 9.5 mm x 1200 mm
- ✓ 2 molle anti-piega
- ✓ 1 ugello orale da 100 mm

Volume: 65 ml
Intervallo di dosaggio: 7.5 ml – 65 ml
Incrementi: 2.5 ml
Regolazione del volume: selezionabile 24 posizioni

850 0002-198

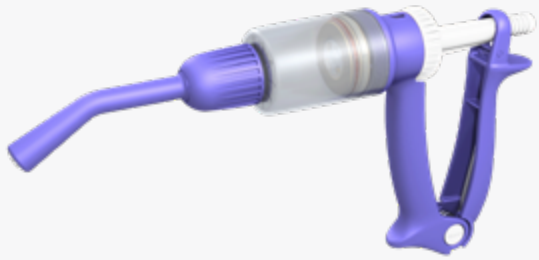

Dosatore orale con portaflacone

Rapidità e immediatezza di intervento sono elementi importanti nelle attività dedicate ai giovani animali, dove le somministrazioni devono essere eseguite in modo rapido e organizzato. Il dosatore orale con portaflacone consente di avere il trattamento sempre disponibile direttamente sul dispositivo, supportando le applicazioni ripetute nelle attività quotidiane di allevamento.

Questa configurazione risulta pratica nelle operazioni di sala parto o nei trattamenti distribuiti su piccoli gruppi, dove ridurre il tempo dedicato alla preparazione del dispositivo aiuta a mantenere maggiore fluidità durante il lavoro.

L'integrazione del flacone direttamente sul dosatore elimina collegamenti esterni e rende il sistema immediatamente pronto all'utilizzo anche nei contesti più dinamici, semplificando il passaggio tra un animale e l'altro.

Ideale per gli allevamenti che necessitano di rapidità operativa, immediatezza d'uso e semplicità nei trattamenti orali frequenti.

DOSATORE ORALE SIMCRO ULTIMATE-BMV PER SUINETTI CON DOSAGGIO SELEZIONABILE ANTERIORMENTE (12 POSIZIONI) DA 2 ML



Il kit include:

- ✓ 1 dosatore con ugello dritto da 57 mm
- ✓ 1 ghiera di bloccaggio per flacone da 24 mm, nero
- ✓ 3 guarnizioni di ricambio O-ring

Volume: 2 ml
Intervallo di dosaggio: 0.2 ml – 2 ml
Incrementi: 0.2 – 0.4 – 0.5 – 0.6 – 0.8 – 1 – 1.2 – 1.4 – 1.5 – 1.6 – 1.8 – 2 ml
Regolazione del volume: selezionabile anteriormente 12 posizioni

850 0004-020

Dosatori orali in plastica con tubo pescante

Le somministrazioni orali su gruppi numerosi di animali richiedono dispositivi in grado di mantenere rapidità e regolarità durante l'intera sequenza di trattamento. I dosatori orali in plastica con tubo pescante consentono di lavorare direttamente dal flacone evitando le interruzioni legate alle ricariche manuali e supportando le attività caratterizzate da applicazioni ripetute.

Il pescaggio continuo rende più regolare la sequenza delle somministrazioni e aiuta a mantenere un ritmo di lavoro costante durante le sessioni più lunghe, riducendo il tempo dedicato alle operazioni accessorie.

La struttura in plastica contribuisce a mantenere il dispositivo leggero e pratico da utilizzare nelle attività intensive, mentre la disponibilità di ugelli e configurazioni differenti consente di adattarsi alle diverse specie animali e modalità di somministrazione orale.

Particolarmente efficaci nelle routine che richiedono leggerezza, rapidità e continuità nelle somministrazioni orali su gruppi numerosi di animali.

DOSATORE ORALE SIMCRO PREMIUM PER AGNELLI A DOSAGGIO VARIABILE CON TUBO PESCANTE DA 5 ML

Il kit include:

- ✓ 1 ugello in metallo da 60 mm
- ✓ 1 tubo pescante Ø 6,4 mm x 1200 mm
- ✓ 2 molle anti-piega

Volume: 5 ml
Intervallo di dosaggio: 1 ml – 5 ml
Incrementi: 0.5 ml
Regolazione del volume: variabile

850 0004-119



DOSATORE ORALE SIMCRO PREMIUM A DOSAGGIO SELEZIONABILE (20 POSIZIONI) CON TUBO PESCANTE DA 10 ML

Il kit include:

- ✓ 1 ugello in metallo da 60 mm
- ✓ 1 tubo pescante Ø 6,4 mm x 1200 mm
- ✓ 2 molle anti-piega

Volume: 10 ml
Intervallo di dosaggio: 0.5 ml – 10 ml
Incrementi: 0.5 ml
Regolazione del volume: selezionabile 20 posizioni

850 0004-953



DOSATORE ORALE NJ PHILLIPS (AD ALTO FLUSSO) A DOSAGGIO VARIABILE CON TUBO PESCANTE DA 25 ML

Il kit include:

- ✓ 1 dosatore con ugello in metallo da 100 mm
- ✓ 1 tubo pescante Ø 9.5 mm x 1500 mm
- ✓ 2 molle anti-piega
- ✓ 1 kit adattatore per tubo pescante

Volume: 25 ml
Intervallo di dosaggio: 1 ml – 25 ml
Incrementi: 1 ml
Regolazione del volume: variabile



850 0000-438

DOSATORE ORALE SIMCRO A DOSAGGIO SELEZIONABILE (27 POSIZIONI) CON TUBO PESCANTE DA 30 ML

Il kit include:

- ✓ 1 dosatore con ugello in metallo da 100 mm
- ✓ 1 tubo pescante Ø 9.5 mm x 1500 mm
- ✓ 2 molle anti-piega

Volume: 30 ml
Intervallo di dosaggio: 4 ml – 30 ml
Incrementi: 1 ml
Regolazione del volume: selezionabile 27 posizioni




850 0000-196

ATTACCO APPLICATORE FLOATING HOOK 15 ML, 20 ML E 30 ML

Il kit include:

- ✓ 1 ugello a gancio
- ✓ 1 tubo pescante Ø 9.5 mm x 1500 mm
- ✓ 1 adattatore zigrinato Ø 9.5 mm x 20 mm
- ✓ 2 molle anti-piega

850 0000-408

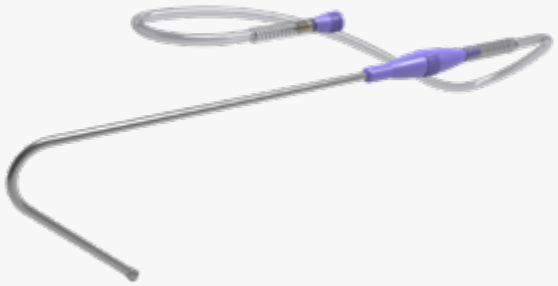

Dosatori orali in metallo con tubo pescante

Le attività orali più intensive richiedono dispositivi progettati per sostenere utilizzi frequenti mantenendo affidabilità e robustezza nel tempo. I dosatori orali in metallo con tubo pescante combinano pescaggio continuo e struttura resistente, offrendo una soluzione adatta alle routine operative più impegnative.

Il collegamento diretto al flacone consente di mantenere il prodotto costantemente disponibile durante le somministrazioni, rendendo più regolare lo svolgimento delle sessioni di lavoro e riducendo le interruzioni durante il trattamento di gruppi numerosi.

La struttura metallica garantisce maggiore resistenza all'usura e rende queste soluzioni adatte ai contesti in cui il dispositivo viene utilizzato intensivamente nel tempo, mantenendo affidabilità anche nelle routine più gravose.

Pensati per le attività che richiedono somministrazioni orali frequenti, utilizzo intensivo e maggiore solidità del dispositivo nelle operazioni quotidiane.

DOSATORE ORALE NJ PHILLIPS IN METALLO A DOSAGGIO VARIABILE CON TUBO PESCANTE DA 20 ML

Il kit include:

- ✓ 1 dosatore
- ✓ 1 ugello per ovini da 10 cm
- ✓ 1 tubo pescante Ø 9.5 mm x 1500 mm
- ✓ 2 molle anti-piega
- ✓ 1 flacone di lubrificante

Volume: 20 ml
Intervallo di dosaggio: 1 ml – 20 ml
Regolazione del volume: variabile

850 0000-419



DOSATORE ORALE PER AGNELLI NJ PHILLIPS IN METALLO A DOSAGGIO VARIABILE CON TUBO PESCANTE DA 10 ML

Il kit include:

- ✓ 1 ugello in metallo per agnelli
- ✓ 1 tubo pescante Ø 6.35 mm x 1500 mm
- ✓ 2 molle anti-piega
- ✓ 1 flacone di lubrificante

Volume: 10 ml
Intervallo di dosaggio: 1 ml – 10 ml
Incrementi: 1 ml
Regolazione del volume: variabile

850 0000-614



DOSATORE ORALE NJ PHILLIPS IN METALLO A DOSAGGIO VARIABILE CON TUBO PESCANTE DA 60 ML

Il kit include:

- ✓ 1 dosatore con ugello di metallo da 150 mm
- ✓ 1 tubo pescante Ø 6.35 mm x 1500 mm
- ✓ 2 molle anti-piega
- ✓ 1 kit adattatore per tubo pescante
- ✓ 1 flacone di lubrificante

Volume: 60 ml
Intervallo di dosaggio: 5 ml – 60 ml
Regolazione del volume: variabile

850 0000-421



Accessori e kit di ricambio

UGELLO AD ALTO FLUSSO A GANCIO PER DOSATORI ORALI NJ PHILLIPS DA 20 ML, 30 ML E 60 ML



Il kit include:

- ✓ 1 ugello a gancio
- ✓ 1 tubo pescante 1500 mm
- ✓ 2 adattatori
- ✓ 2 molle anti-piega
- ✓ 1 ugello zigrinato Ø 9.5 mm x 20 mm con ghiera

850 0000-177

UGELLO PER PECORE PER DOSATORI ORALI NJ PHILLIPS



Il kit include:

- ✓ 1 ghiera
- ✓ 1 guarnizione O-ring

850 0001-318

KIT CONVERSIONE DA DOSATORE ORALE NJ PHILLIPS IN METALLO CON TUBO PESCANTE DA 20 ML A SIRINGA CON ATTACCO LEUR LOCK




Il kit include:

- ✓ 1 accessorio per iniezione con attacco Luer Lock
- ✓ 1 raccordo di ingresso a doppia zigrinatura
- ✓ 1 tubo pescante Ø 4.8 mm x 800 mm
- ✓ 1 chiave per raccordo ago, blu

850 0001-236

KIT DI RICAMBIO PER DOSATORE ORALE CON TUBO PESCANTE PER AGNELLI DA 10 ML

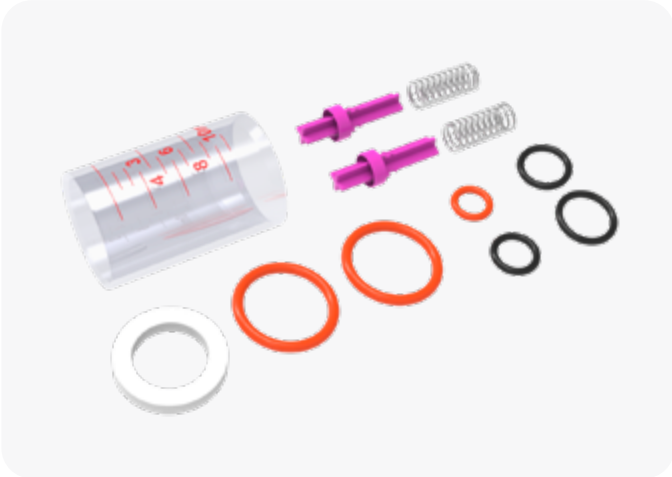

Il kit include:

- ✓ 1 cilindro da 10 ml
- ✓ 2 valvole di uscita con molle
- ✓ 6 guarnizioni O-ring
- ✓ 1 guarnizione in feltro

850 0001-257

KIT DI RICAMBIO PER DOSATORE ORALE CON TUBO PESCANTE DA 20 ML




Il kit include:

- ✓ 1 cilindro da 20 ml
- ✓ 5 guarnizioni O-ring
- ✓ 1 testa del pistone, guarnizione in feltro e guarnizione O-ring
- ✓ 2 valvole di uscita e molle
- ✓ 1 molla di ritorno
- ✓ 1 cuscinetto della leva
- ✓ 1 clip (e-ring)
- ✓ 1 flacone di lubrificante da 15 ml
- ✓ 1 guida dell'asta

850 0000-433

KIT DI RICAMBIO PER DOSATORE ORALE CON TUBO PESCANTE DA 60 ML

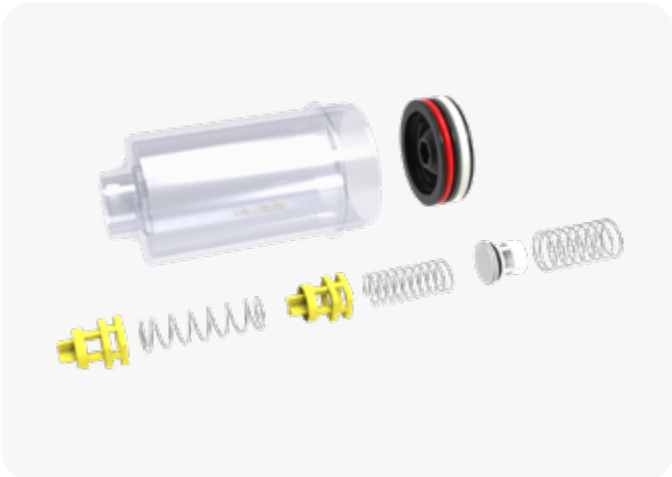

Il kit include:

- ✓ 1 cilindro da 60 ml
- ✓ 2 valvole e molle
- ✓ 1 testa del pistone, guarnizione in feltro e O-ring

850 0000-430

Applicatori topici con tubo pescante

Distribuire il trattamento in modo uniforme lungo la linea dorsale dell'animale è fondamentale nelle applicazioni pour-on, soprattutto quando il lavoro coinvolge gruppi numerosi e richiede rapidità di esecuzione. Gli applicatori topici con tubo pescante sono progettati per supportare questo tipo di trattamento mantenendo regolarità durante l'erogazione del prodotto.

Il sistema di pescaggio consente di lavorare direttamente dal flacone evitando interruzioni dovute alla ricarica manuale del dispositivo, soluzione adatta alle attività che prevedono elevati volumi di trattamento o lunghe sessioni operative.

Gli ugelli dedicati favoriscono una distribuzione controllata e omogenea del prodotto, migliorando la copertura lungo la linea dorsale e contribuendo a ridurre sprechi o dispersioni durante l'applicazione.

Una soluzione sviluppata per gli allevamenti che richiedono rapidità, uniformità di distribuzione e regolarità nei trattamenti pour-on su gruppi numerosi di animali.

APPLICATORE TOPICO SIMCRO CON EROGAZIONE A VENTAGLIO E TUBO PESCANTE DA 30 ML

Il kit include:

- ✓ 1 applicatore con cilindro in polipropilene e ugello spray a ventaglio
- ✓ 1 tubo di pescante Ø 6.4 mm x 1200 mm EPDM
- ✓ 2 molle anti-piega

Volume: 30 ml
Intervallo di dosaggio: 4 ml – 30 ml
Incrementi: 1 ml
Regolazione del volume: variabile



850 0000-289

APPLICATORE TOPICO SIMCRO BREAZE A DOSAGGIO SELEZIONABILE E TECNOLOGIA A BASSA FORZA MANUALE CON TUBO PESCANTE DA 65 ML

Il kit include:

- ✓ 1 applicatore con ugello standard topico e gancio
- ✓ 1 tubo pescante Ø 9.5 mm x 1200 mm TPR
- ✓ 2 molle anti-piega

Volume: 65 ml
Intervallo di dosaggio: 10 ml – 65 ml
Incrementi: 2.5 ml
Regolazione del volume: selezionabile



850 0013-930

APPLICATORE TOPICO SIMCRO MAGNUM CON TUBO PESANTE DA 70 ML

Il kit include:

- ✓ 1 applicatore con ugello a doccia
- ✓ 1 tubo pescante Ø 9.5 mm x 1250 mm PVC
- ✓ 2 molle anti-piega
- ✓ 1 guarnizione di ricambio O-ring
- ✓ 1 guarnizione di ricambio in feltro

Volume: 70 ml
Intervallo di dosaggio: 10 ml – 70 ml
Incrementi: 2.5 ml
Regolazione del volume: selezionabile



850 0000-380



Soluzioni a zaino

Lavorare su gruppi distribuiti di animali o in ambienti particolarmente ampi può rendere meno pratico l'utilizzo di sistemi tradizionali collegati direttamente al flacone. Le soluzioni a zaino nascono per offrire maggiore autonomia operativa, permettendo all'operatore di trasportare direttamente il prodotto durante il trattamento.

Il serbatoio indossabile consente di muoversi più liberamente all'interno dell'allevamento senza dover riposizionare continuamente il flacone o interrompere il lavoro per gestire gli spostamenti del sistema di alimentazione. Questo approccio risulta vantaggioso nelle attività che richiedono trattamento continuativo su aree estese o durante interventi che prevedono frequenti spostamenti.

La disponibilità costante del prodotto contribuisce a rendere più fluida l'organizzazione del lavoro quotidiano, soprattutto nei contesti in cui rapidità di movimento e praticità operativa rappresentano elementi importanti del trattamento.

Grazie alla loro configurazione, queste soluzioni permettono di combinare capacità operativa, autonomia e libertà di movimento nelle condizioni di lavoro più dinamiche.

ZAINO FLEXIPACK DA 5 LITRI

Il kit include:

- ✓ 1 tappo di chiusura da 38 mm
- ✓ 1 tappo a doppio beccuccio da 38 mm con tubo pescante Ø 6.4 mm x 385 mm
- ✓ 1 cinghia per zaino

850 0000-398



ZAINO RIGIDO CON ACCESSORI DA 2.5 LITRI

Il kit include:

- ✓ 1 tappo di chiusura da 38 mm
- ✓ 1 tappo a doppio beccuccio da 38 mm con tubo pescante Ø 6.4 mm x 333 mm
- ✓ 1 cinghia per zaino

850 0013-894



ZAINO RIGIDO CON ACCESSORI DA 5 LITRI

Il kit include:

- ✓ 1 tappo di chiusura da 38 mm
- ✓ 1 tappo a doppio beccuccio da 38 mm con tubo pescante Ø 6.4 mm x 405 m
- ✓ 1 cinghia per zaino

850 0013-895



Accessori e kit di ricambio

ZAINO CON BRETELLE DA 2.5 A 5 LITRI

850 0004-990



Metricheck

Individuare rapidamente eventuali anomalie post-parto può contribuire a migliorare il benessere dell'animale e a supportare interventi più tempestivi nella gestione sanitaria dell'allevamento. Metricheck nasce per rendere i controlli uterini più semplici, immediati e facilmente inseribili nelle attività quotidiane.

Il sistema consente di effettuare verifiche non invasive senza ricorrere a procedure complesse, permettendo di monitorare con maggiore regolarità le condizioni dell'animale dopo il parto. Questo approccio aiuta a integrare i controlli sanitari nelle normali routine operative senza rallentare il lavoro quotidiano.

La semplicità di utilizzo e la rapidità di pulizia rendono il dispositivo pratico anche nei programmi di monitoraggio frequente, soprattutto negli allevamenti in cui prevenzione e tempestività rappresentano elementi importanti nella gestione della salute animale.

Una soluzione sviluppata per supportare controlli post-parto rapidi, regolari e facilmente eseguibili all'interno delle normali attività di allevamento.

IMPUGNATURA METRICHECK CON 2 TAPPI DI RICAMBIO



850 0000-347 (Confezione 2 pz.)

TAPPI DI RICAMBIO METRICHECK



Codice: 850 0004-423 (Confezione 5 pz.)

Sistemi di somministrazione senza ago Pulse

Ridurre le operazioni legate alla gestione dell'ago può rendere più rapide e lineari le attività caratterizzate da vaccinazioni o trattamenti ripetuti su gruppi numerosi di animali. I sistemi di somministrazione senza ago Pulse offrono un approccio alternativo ai metodi tradizionali, introducendo una modalità di trattamento progettata per semplificare il lavoro nelle applicazioni ad alta frequenza.

L'assenza dell'ago elimina le attività di sostituzione e smaltimento, contribuendo a rendere più ordinata l'organizzazione delle sessioni operative e riducendo le interruzioni durante il trattamento. Questo approccio permette di mantenere maggiore regolarità nelle attività quotidiane e di alleggerire il lavoro nelle applicazioni ripetitive.

Questa tecnologia risulta particolarmente interessante nei contesti in cui rapidità di esecuzione, benessere animale e riduzione delle manipolazioni rappresentano aspetti importanti nella conduzione dell'allevamento. La disponibilità di configurazioni dedicate consente inoltre di adattare il sistema alle differenti esigenze operative e alle diverse specie animali.

Una tecnologia pensata per gli allevamenti che desiderano adottare un sistema di somministrazione alternativo, mantenendo rapidità di trattamento, organizzazione delle attività e riduzione delle operazioni accessorie legate all'utilizzo dell'ago.

SIRINGA PULSE P50 PER SUINETTI CON INTERVALLO DI DOSAGGIO DA 0.1 ML A 0.5 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa P50
- ✓ 1 tubo flessibile per l'aria
- ✓ 1 portaflacone
- ✓ 1 kit di attrezzi
- ✓ 1 kit guarnizioni di ricambio O-ring
- ✓ 1 manuale d'istruzioni
- ✓ 1 adattatore per l'aria

Volume: 0.5 ml
Intervallo di dosaggio: 0.1 ml – 0.5 ml
Incrementi: 0.1 ml
Regolazione del volume: selezionabile



850 6000-001

SIRINGA PULSE P250 PER SUINETTI CON PORTAFLACONE E IMPUGNATURA BLU DA 1 ML E 2 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa P250 con portaflacone
- ✓ 1 tubo ad alta pressione da 152.4 cm
- ✓ 2 regolatori di dose (2 ml e 1 ml)
- ✓ 1 impugnatura blu per suinetti
- ✓ 1 tubo flessibile per l'aria
- ✓ 1 kit di attrezzi
- ✓ 1 kit di guarnizioni di ricambio O-ring
- ✓ 1 manuale d'istruzioni
- ✓ 1 adattatore pneumatico (da 3.2 mm a 6.4 mm)
- ✓ 1 gilet

Volume: 2.5 ml
Intervallo di dosaggio: 0.5 ml – 2.5 ml
Incrementi: 0.1 ml
Regolazione del volume: selezionabile tramite regolatori di dose



850 6000-002

SIRINGA PULSE P250 PER SUINI CON PORTAFLACONE E IMPUGNATURA VERDE DA 1 ML E 2 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa P250 con portaflacone
- ✓ 1 tubo ad alta pressione da 150 cm
- ✓ 2 regolatori di dose (2 ml e 1 ml)
- ✓ 1 impugnatura verde per suini
- ✓ 1 tubo flessibile per l'aria
- ✓ 1 kit di attrezzi
- ✓ 1 kit di guarnizioni di ricambio O-ring
- ✓ 1 manuale d'istruzioni
- ✓ 1 adattatore pneumatico (da 3.2 mm a 6.4 mm)
- ✓ 1 gilet

Volume: 2.5 ml
Intervallo di dosaggio: 0.5 ml – 2.5 ml
Incrementi: 0.1 ml
Regolazione del volume: selezionabile tramite regolatori di dose

850 6000-003



SIRINGA PULSE P250 PER BOVINI DA LATTE CON PORTAFLACONE E IMPUGNATURA VERDE DA 1 ML E 2 ML

Il kit include:

- ✓ 1 siringa P250 con portaflacone
- ✓ 1 tubo ad alta pressione da 190 cm
- ✓ 2 regolatori di dose (2 ml e 1 ml)
- ✓ 1 impugnatura verde per bovini da latte
- ✓ 1 tubo flessibile per l'aria
- ✓ 1 kit di attrezzi
- ✓ 1 kit di guarnizioni di ricambio O-ring
- ✓ 1 manuale d'istruzioni
- ✓ 1 adattatore pneumatico (da 3.2 mm a 6.4 mm)
- ✓ 1 gilet

Volume: 2.5 ml
Intervallo di dosaggio: 0.5 ml – 2.5 ml
Incrementi: 0.1 ml
Regolazione del volume: selezionabile tramite regolatori di dose

850 6000-004



SIRINGA PULSE FX CON TUBO DELL'ARIA DA 0.5 ML

Il kit include:

- ✓ 1 tubo dell'aria
- ✓ 1 tappo di prelievo da 20 mm
- ✓ 1 tappo di prelievo da 30 mm
- ✓ 1 lubrificante Gold Cup
- ✓ 1 manuale d'istruzioni

Volume: 0.5 ml
Regolazione del volume: fissa



850 6000-008

SIRINGA PULSE FX CON TUBO DELL'ARIA DA 1 ML

Il kit include:

- ✓ 1 tubo dell'aria
- ✓ 1 tappo di prelievo da 20 mm
- ✓ 1 tappo di prelievo da 30 mm
- ✓ 1 lubrificante Gold Cup
- ✓ 1 manuale d'istruzioni

Volume: 1 ml
Regolazione del volume: fissa



850 6000-009

SIRINGA PULSE FX CON TUBO DELL'ARIA DA 2 ML

Il kit include:

- ✓ 1 tubo dell'aria
- ✓ 1 tappo di prelievo da 20 mm
- ✓ 1 tappo di prelievo da 30 mm
- ✓ 1 lubrificante Gold Cup
- ✓ 1 manuale d'istruzioni

Volume: 2 ml
Regolazione del volume: fissa



850 6000-010

Accessori e kit di ricambio

IMPUGNATURA PULSE P250 BLU PER SUINETTI - FINO A 20 KG



850 6000-005

IMPUGNATURA PULSE P250 VERDE PER SUINI – DAI 5 KG



850 6000-006

IMPUGNATURA PULSE P250 PER BOVINI DA LATTE



850 6000-007

KIT ARIA PULSE CON COMPRESSORE EINHELL DA 50 L E 10 BAR



Il kit include:

- ✓ 1 compressore Einhell TC-AC 420/50/10 V
- ✓ 1 tubo flessibile per l'aria da 20 metri
- ✓ 1 sdoppiatore d'aria a 2 vie, standard europeo
- ✓ 1 prolunga elettrica da 10 metri

850 6000-000

KIT ARIA PULSE CON COMPRESSORE STANLEY DA 25 L E 10 BAR



Il kit include:

- ✓ 1 compressore Stanley FATMAX D251/10/24
- ✓ 1 tubo flessibile per l'aria da 20 metri
- ✓ 1 sdoppiatore d'aria a 2 vie, standard europeo
- ✓ 1 prolunga elettrica da 10 metri

850 6000-014

KIT ARIA PULSE CON SISTEMA CO_2



Il kit include:

- ✓ 1 regolatore
- ✓ 1 bilancia digitale da circa 25 kg
- ✓ 1 stazione di riempimento
- ✓ 1 bombola CO_2 da circa 680 ml

850 6000-012

BOMBOLA DI CO_2 DA 680 G




850 6000-013




Istruzioni di assemblaggio

Istruzioni per il dosaggio fisso:

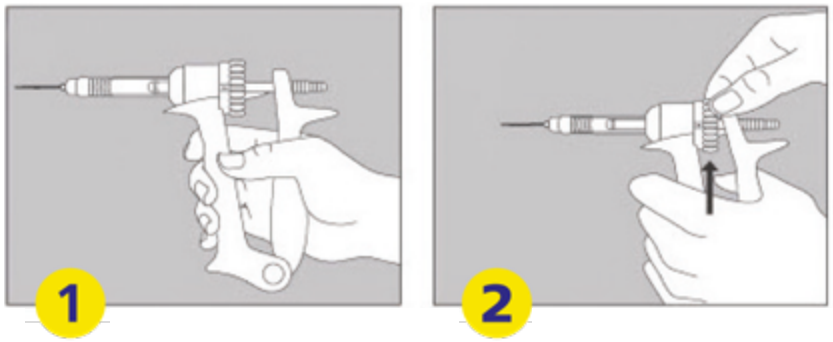


(1) Il dispositivo è dotato di un'unica opzione di dosaggio fisso, chiaramente indicata nella finestra dell'indicatore. (2) Sebbene il dispositivo presenti un selettore di dosaggio, questo è bloccato e non può essere spostato o regolato.

Istruzioni per il dosaggio variabile:

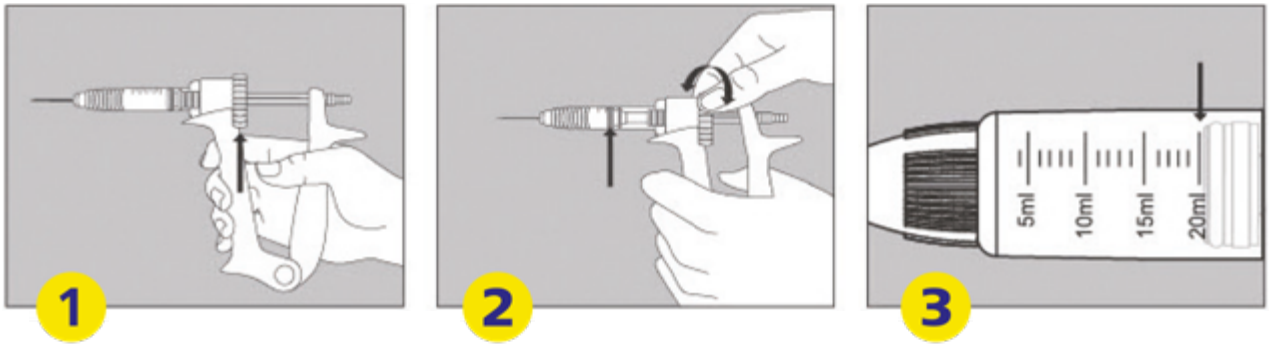


Per impostare il dosaggio ruotare il selettore (1) in senso orario o antiorario fino a quando la parte anteriore del pistone si allinea con il valore di dosaggio riportato nel cilindro graduato (2–3).

Istruzioni per il dosaggio selezionabile anteriormente:

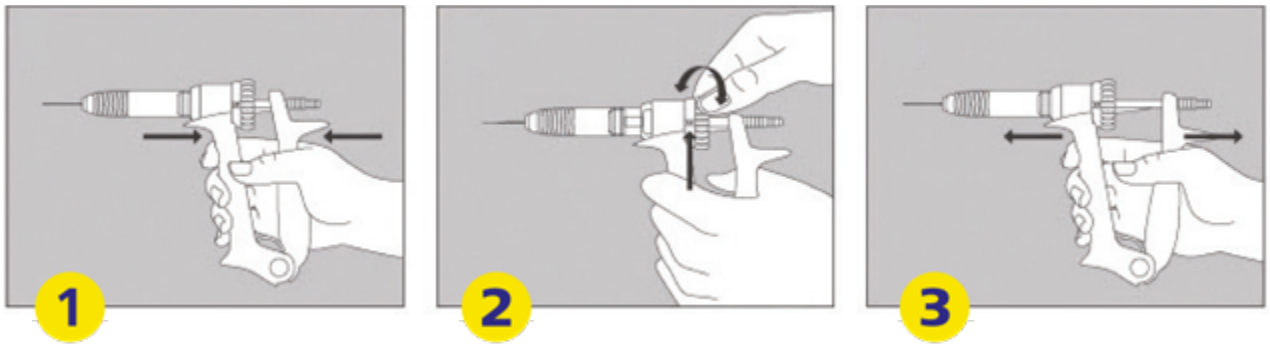

Premere l'impugnatura della siringa sino a fine corsa (1) per attivare il meccanismo di regolazione. Ruotare il selettore di dosaggio in senso orario o antiorario fino a visualizzare la dose desiderata nel cilindro graduato (2). Una volta impostata la dose, rilasciare l'impugnatura (3).

Istruzioni per la siringa in nylon / dosaggio a blocco variabile:

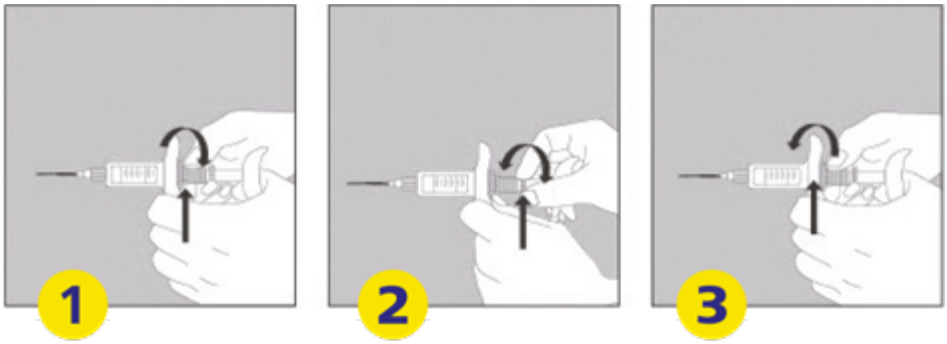

Ruotare la ghiera di blocco in senso antiorario per sbloccare il selettore di dosaggio (1). Ruotare il selettore di dosaggio (2) in senso orario o antiorario fino a quando la parte anteriore del pistone si allinea con il valore di dosaggio indicato sul cilindro graduato. Ruotare nuovamente la ghiera di blocco in senso orario (3) per fissare l'impostazione del dosaggio.

DATAMARS
Livestock



C'È SEMPRE QUALCOSA DI NUOVO DA IMPARARE

Scopri la Datamars Livestock Training Academy, la piattaforma online e gratuita che offre corsi dedicati alla corretta somministrazione dei trattamenti veterinari, ai diversi sistemi di applicazione e alle buone pratiche operative che contribuiscono a rendere la gestione sanitaria dell'allevamento più sicura, efficace e sostenibile. Un percorso formativo pensato per migliorare competenze pratiche, rafforzare precisione e sicurezza in ogni trattamento e trasformare ogni intervento in un passo verso una gestione della salute animale sempre più consapevole e responsabile.

- Accesso Libero
- Corsi Rivedibili
- Materiali Formativi
- Certificazioni Digitali

Per maggiori informazioni, visita il nostro sito web:
👉 academy.livestock.datamars.com

DATAMARS

Livestock™

Unisciti alla nostra community
su Instagram

0363 938700 335 606 7069 commerciale@datamars.com livestock.datamars.eu